



WebReq og WebReq Admin

Release notes d. 10.06.2025

INDHOLD

1	WEBREQ	3
1.1	INDLÆSE/SLETTE FLERE REKVISITIONER FRA GEMTE OG HOTEL (ID 2,13,30 WR-1393,1394,1407)	3
1.2	FLERE TELEFONNUMRE SENDES MED I EDI (ID 4, WR-1395)	4
1.3	BESVAREDE SPØRGSMÅL PÅ GEMTE REKVISITIONER VISES I OPLYSNINGER (ID 5,14, 10, WR-1396, 1397,1401)	4
1.4	SYNLIG PATIENTVEJLEDNING PÅ ANALYSE (ID 6 WR-1398)	4
1.5	FORBEDRET ANALYSEOVERSICHT PÅ BESTILLINGSLISTEN (ID 8, 19 WR-1399, 1402)	5
1.6	TYDELIGGØRELSE AF PATIENT PROFILER (ID 9 WR-1400)	5
1.7	BESTILLING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER FORBEDRET (ID 22, WR-1404, 1433)	5
1.8	ADVISTEKSTER NULSTILLES - FOR AT FORBEDRE FUNKTIONALITETEN (ID 26, WR-1406)	6
1.9	CVR-NUMRE KAN REDIGERES UNDER KLINIKOPLYSNINGER (WR-1426)	7
1.10	KOPIMODTAGER SES PÅ BLANKETTEN (WR-971)	7
1.11	VÆRKTØJSMENUEN KAN NU TILPASSES (WR-1092, 1093)	8
1.12	ADVIS PÅ PROFILER (ID 25, R-1405)	8
1.13	PROFILUDTRÆK (WR-1347)	9
1.14	FLYT/KOPIER EN DELT PROFIL TIL EGET DEFAULT LABORATORIE (WR-1392)	9
1.15	UNDERSTØTTELSE FOR "BORGERENS FRABEDELSE AF SVAR" (WR-1367)	10
1.16	TEKNISKE RETTELSE PÅ WEBREQ	10
2	WEBREQ ADMIN.	11
2.1	TILRETNING I FORBINDELSE MED ANALYSE PLACERING (WR-1475, WRA-765)	11
2.2	FORBEDRING AF BESKEDFUNKTION I ADMIN (WRA-652,687)	11
2.3	FELT TIL PATIENTVEJLEDNINGER PÅ ANALYSER (ID 6, WRA-743)	12
2.4	SØG REKVIRENT PÅ CVR-NR. (WRA-748)	12
2.5	VISNING AF REKVISITIONSTYPE VED SØG REKVISITIONER (WRA-749)	12
2.6	VISNING AF STATUS PÅ DATABEHANDLERAFTALE (WRA-750)	13
2.7	PÅ KLINIKPROFILER SES HVILKET LAB. ANALYSERNE TILHØRER (WRA-755)	13
2.8	SYSTEMBESKEDER VISER BESKEDTYPE (WRA-761)	13
2.9	FELTET DEFAULT REKVISITIONSTYPE FLYTTES TIL KLINIK OPSÆTNING (WRA-763)	14
2.10	ÆNDRINGER I ADGANGSKORT TIL MOBILLAB (WRA-752)	14
2.11	TEKNISKE FORBEDRINGER	14

1 WebReq

1.1 Indlæse/slette flere rekvisitioner fra Gemte og Hotel (ID 2,13,30 WR-1393,1394,1407)

Man kan nu indlæse eller slette flere rekvisitioner på én gang fra **Hotel** eller **Gemte**. Marker de ønskede rekvisitioner ved at holde **Ctrl knappen** nede når der vælges.

Filtrer efter Indlæs Kladde Slet

Periode

	Ønsket prøvetid	Rekvisitionsnummer	CPR-nummer	Navn
I dag				
I går	☒ 14-02-2025 13:24	1513006506	0201609995	Einer Test Lauridsen
Seneste uge	☒ 19-02-2025 15:57	101370200641	0201609995	Einer Test Lauridsen
Seneste 2 uger	☐ 19-02-2025 15:58	101370200650	0201609995	Einer Test Lauridsen

Vis alt

Indlæsning af rekvisitioner på 2 måder:

1 Rekvisitioner med samme rekvirent → samles i én rekvisition

Hvis der af en årsag ikke er muligt at slå rekvisitionerne sammen, indlæses de i forlængelse af hinanden:

Indlæs rekvisition

De valgte rekvisitioner kan ikke slås sammen og skal udføres en ad gangen i Webreq

OK

2 Rekvisitioner med forskellige rekvirenter → indlæses og laves i forlængelse af hinanden.

Informationer til rekvirenten i dette forløb

Ved indlæsning:

Indlæs rekvisition

De valgte rekvisitioner kan ikke slås sammen og skal udføres en ad gangen i Webreq

OK

På bestillingslisten vises:

1 af 2 rekvisitioner

Bestilling 1 / 2 Seneste svar

Nancy Ann Berggreen 251248-9996

Prøvetagningstid

10-04-2025 12:27

Advis Oplysninger Gem Udfør

På kvitteringssiden, skal næste rekvisition aktiveres.

Kvittering

Bestilling gennemført

Næste rekvisition Genbestil Genudskriv

Bestilling 2 / 2

Seneste svar

Nancy Ann Berggreen

251248-9996

1.2 Flere telefonnumre sendes med i EDI (ID 4, WR-1395)

Er der opgivet 2 telefonnumre på patienten, bliver de nu begge sendt med i EDI'en til laboratoriet.

Det er kun mobilnummeret der skrives på PrøveTagningsBlanketten (PTB) hvis angivet.

Patient oplysninger	
CPR-nummer:	251248-9996
Fornavn:	Nancy Ann
Efternavn:	Berggreen
Telefonnummer:	99889796
Mobil / SMS:	24111111

1.3 Besvarede spørgsmål på Gemte rekvisitioner vises i Oplysninger (ID 5,14, 10, WR-1396, 1397,1401)

Nyt i forbindelse med **Gem** Rekvisition:

- Lægen skal tage stilling til **Advarselsregler/spørgsmål** og svaret vises i **Oplysninger**, når rekvisitionen indlæses ved prøvetagning.

Rekvisitionsoplysninger	
Prøvetagningstid 11-04-2025 07:59	Klinik analyser 25-Hydroxy-Vitamin D3:P
Indikation (Vitamin D): * Ringe soleksponering / tildækning	

ANALYSE ADVARSLER	
Der er allerede svar på følgende analyser	
25-Hydroxy-Vitamin D3:P	Fjern fra bestilling
25-Hydroxy-Vitamin D3:P	***** nmol/L 04-01-2023
Begrundelse for genbestilling *	

- Med mouseover på **Gemt** rekvisition ses begrundelse, hvis der har været en Advarselsregel på analysen.

Patient oplysninger	
11-04-2025 08:09	2512489996
Bestillingstid: 11-04-2025 08:11	
Information til prøvetager: Fordi sidste svar var mislykket	
Analyser 25-Hydroxy-Vitamin D3:P	

1.4 Synlig patientvejledning på analyse (ID 6 WR-1398)

Hvis laboratoriet sætter en patientvejledning på en analyse, vises linket nu direkte på analysen med mouseover.


Favorit analyser	Patient Profiler
Slagelse, Sygehus Vestsjælland ☐ Hæmoglobin:B ☐ WebPatient (PLO) ☐ Hjemmeblodtryk	☐ standard ☐ Nancy speci ☐ Patientvejledning

Bestilling	
Nancy Ann Berggreen	251248-9996
Prøvetagningstid: 11-04-2025 12:30	
Avis Oplysninger Gem Udfør	
Klinik analyser	Fylt til
☒ Hæmoglobin:B	Patientvejledning

1.5 Forbedret analyseoversigt på Bestillingslisten (ID 8, 19 WR-1399, 1402)


Opdeling af analyser på bestillingslisten:

- Grupperet efter analysegruppe
- Alfabetisk under analysegruppe
- Egne analyser er markeret med grå bullet.

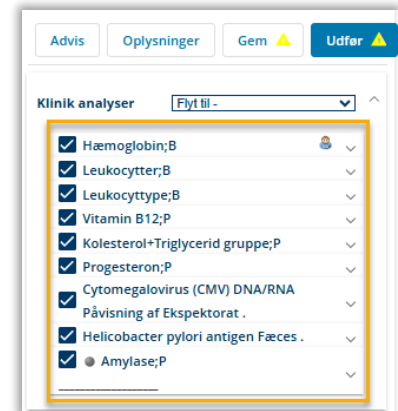


1.6 Tydeliggørelse af Patient Profiler (ID 9 WR-1400)

Patient Profiler vises nu under egen overskrift øverst i listen under **Favoritter**. **Patient ikon** med mouseover vil nu også være synlig.

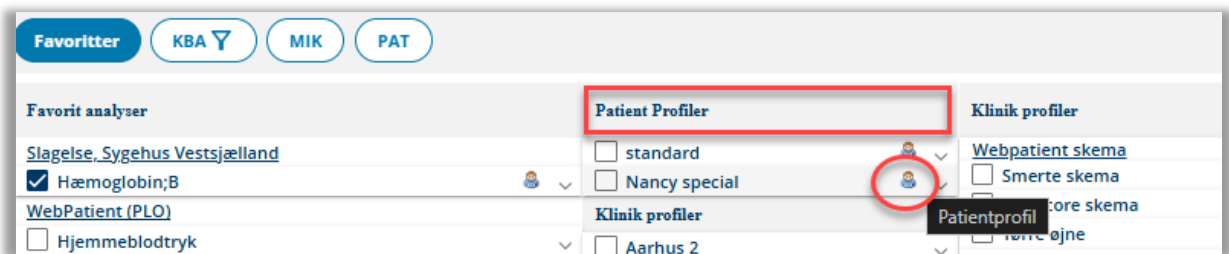

1.7 Bestilling af patologiundersøgelser forbedret (ID 22, WR-1404, 1433)

Søgning og arbejdsflow er forbedret ved Patologi (PAT). Da der ofte tilføjes ekstra kommentarer, er der lavet en genvejsknap til **Yderligere informationer**, som også findes under **Oplysninger**.

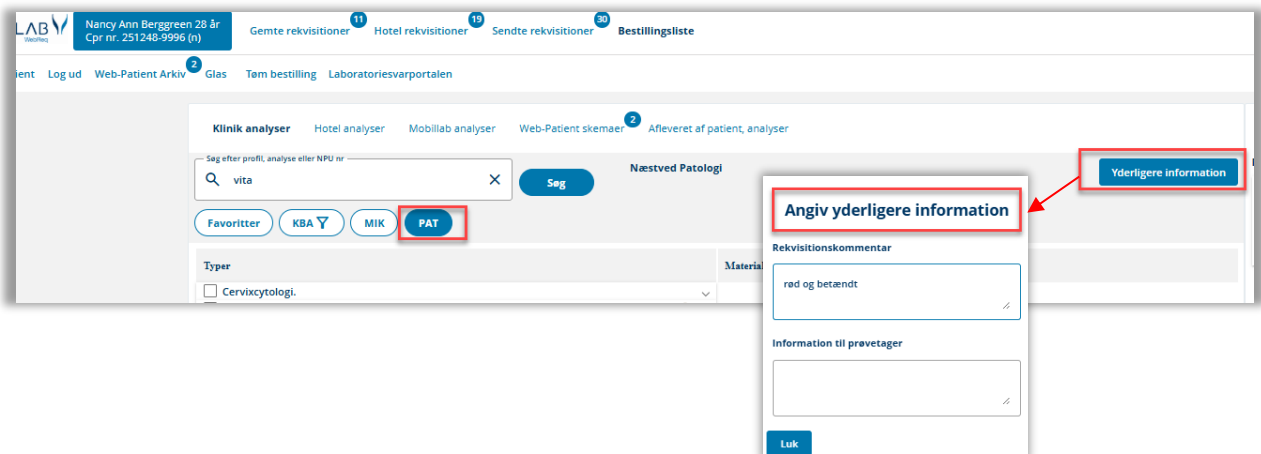

1.8 Advistekster nulstilles - for at forbedre funktionaliteten (ID 26, WR-1406)

Advis anvendes når man vil sende besked til patienten omkring en kommende blodprøvetagning. Funktionen er nu delt i to for at udvide løsningen

Advis til patienten (daglig brug):

- 1 Klik på **Advis**
- 2 Angiv/tilret mail og/eller mobilnr.
- 3 Udvælg tekst (markeres grå)
- 4 Besked der sendes. Tilret evt. denne ene besked.
- 5 **Udfør**
- 6 ✓ ved Advis, - Advis er tilføjet

The screenshot shows the 'Patient advis' form. It has fields for 'Email adresse' (1), 'Mobilnummer (SMS)' (2), and 'Adviser antal dage før prøvetagning' (3). There is a list of pre-written messages (4) and a 'Udfør' button (5). A secondary window on the right shows a confirmation dialog with 'Advis' (1), 'Oplysninger' (2), 'Gem' (3), and 'Udfør' (4) buttons, and a 'Hent gamle tekster' button (5).

Opsætning af Advis:

Under **Tandhjulet** → **Rediger advis tekster** kan Advis tekster;

Oprettes, redigeres, slettes og indlæses fra tidligere Webreq version.

The screenshot shows the 'Rediger advis tekster' menu. It has a header with 'SYNLAB Ydernr: 990100', a bell icon, a gear icon (1), and a 'EILA' button. The menu items are 'Rediger egne analyser', 'Opret / Rediger profiler', and 'Rediger advis tekster' (2).

Er dine tekster væk? Anvend "Hent gamle tekster"

Rækkefølge ændres ved at marker en Advis og flytte med pilene.

The screenshot shows the 'Rediger advis tekster' form. It has a list of messages (1) and a 'Hent gamle tekster' button (2). At the bottom, there are buttons for 'Opret' (3), 'Ret' (4), 'Slet' (5), and 'Hent gamle tekster' (6).

1.9 CVR-numre kan redigeres under Klinikoplysninger (WR-1426)

Praksis kan nu selv ajourføre deres **CVR-nr.** under **Klinikoplysninger**. Her tilføjes også **CVR-nr.** for samarbejdsklinikker som skal have adgang.

The screenshot illustrates the workflow for editing CVR numbers. It starts with the user's profile header showing 'SYNLAB Ydernr: 990100'. A red box highlights this, with an arrow pointing to a 'Ret' (Edit) button in the 'CVR nr' field of the 'Klinikoplysninger' section. This button leads to a modal window titled 'Ændring af CVR-nr.' which displays a list of CVR numbers (92348870, 91745962, 94646341) with 'Slet' (Delete) buttons next to them, and a 'Tilføj' (Add) button at the bottom.

1.10 Kopimodtager ses på blanketten (WR-971)


Kopisvarmodtager kommer nu igen på PrøveTagningsBlanketten, hvis man henter en rekvisition ned fra hotellet, hvor man som prøvetager, også ønsker at modtage svar.

The screenshot shows a laboratory requisition form. Key information includes the patient name 'Berggren, Nancy Ann Test', the laboratory 'Lægehuset i Forskerparken', and the date '24-03-2025'. A red box highlights the 'Kopimodtager' (Copy recipient) field, which is set to '573573 Lægehuset i Forskerparken'. The form also displays a barcode and the text 'Original rekvisit: 990100 SYNLAB XMO'.

1.11 Værktøjsmenuen kan nu tilpasses (WR-1092, 1093)

På brugerniveau kan **Værktøjsmenuen** nu tilrettes.


- 1 **Værktøjsmenu** kan slås til/ fra under initialerne
- 2 Ved de tre streger kan der til- og fravælges mellem funktioner.

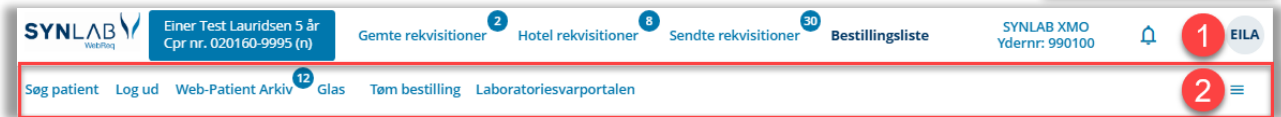

Opsætning:

På listen til højre, som her er markeret med grøn, ses de funktioner som vises på **Værktøjslinjen**.


Marker den funktion der ønskes → Klik Tilføj →
Juster rækkefølgen hvis nødvendig → Gem

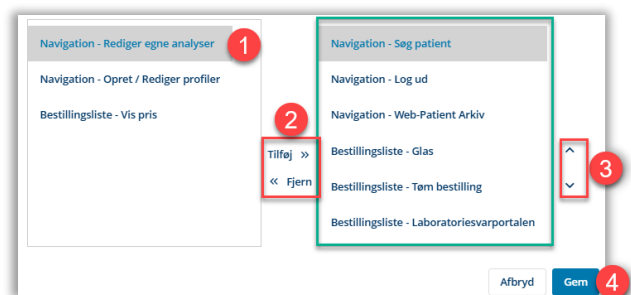

1.12 Advis på Profiler (ID 25, R-1405)

Der er nu mulighed for at sætte Advis (SMS-reminder) som standard på hver klinik profil, dvs. at man på profilniveau kan gemme en advisering. Denne advis vil automatisk blive sendt med når profilen bestilles.


Tryk på **Tandhjulet** → **Opret/Rediger profiler** → **Advis**

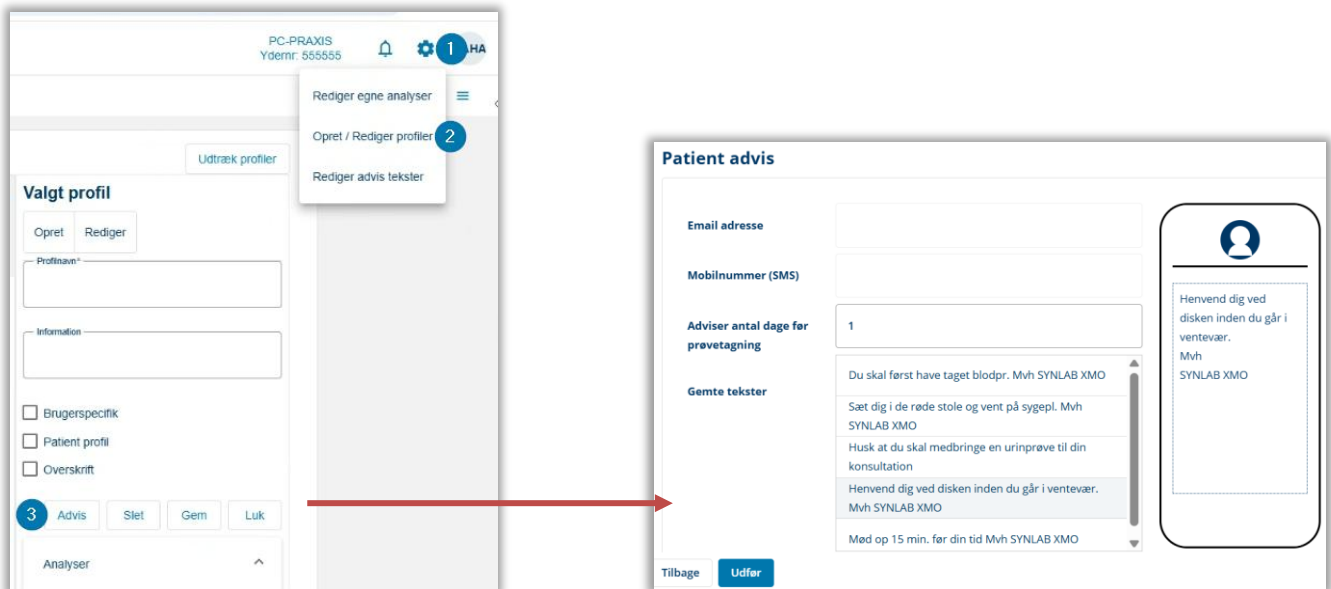

1.13 Profiludtræk (WR-1347)

Du kan lave profiludtræk over dine klinikprofiler.


Tryk på **Tandhjulet** → **Opret/Rediger profiler** → **Udtræk profiler**

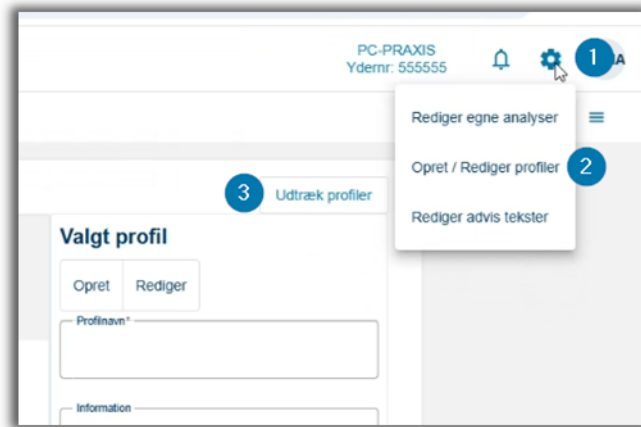

1.14 Flyt/kopier en delt profil til eget default laboratorium (WR-1392)


Deling af profiler, ved f.eks. opsplitning af en klinik, kan nu let foretages, hvis del profiler er sat på ved **Klinik info** på den ene klinik. Profilerne kommer ind til klinikkens egne profiler med tildeling af sine egne defaultlaboratorier: Klik på:

Tandhjul → **Opret/rediger profiler** → **Kopier delt profil og udvælg** → **navngiv og gem som vanligt**

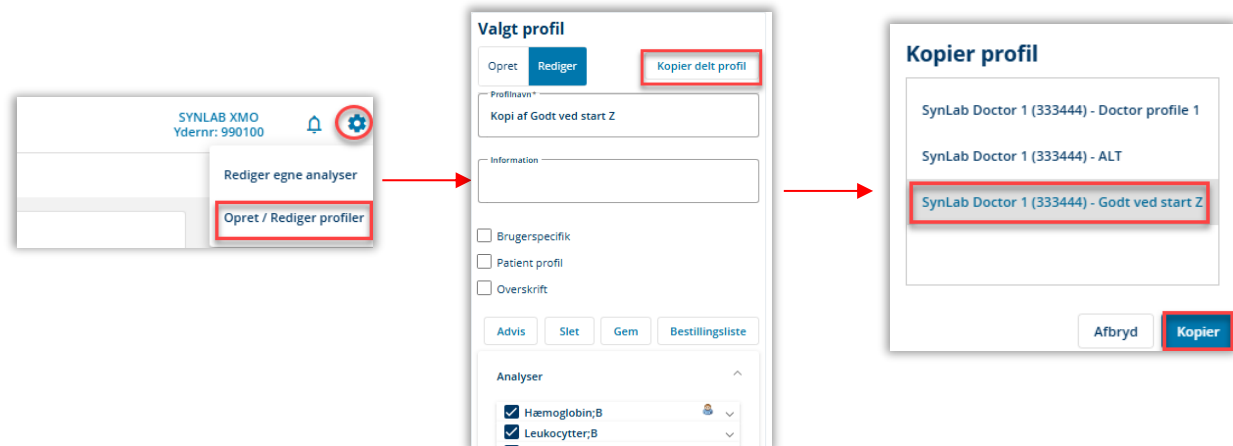

1.15 Understøttelse for "borgerens frabedelse af svar" (WR-1367)

WebReq understøtter nu, hvis patienten har frabedt sig deling af nogle laboratoriesvar. Det angives ved **Seneste svar** med en rød trekant og mouseover vil give årsagen.

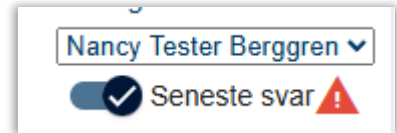

1.16 Tekniske rettelser på Webreq

WR-948: Lange initialer på rekvirent forskubber ikke længere barkoderne på Prøvetagningsblanket

WR-1412: Forbedring af tal på **Barkode etikette (PTB)**, som kan vises i toppen af glasset.

WR-1420: Nu er der mulighed for at vælge historisk dato i **Kalenderen**.

WR-1449: Man kan ikke længere rette en slettet rekvisition.

WR-1456, 1479: Teknisk tilretning på **Opret/rediger profiler**

WR-1431,1442, 1455, 1458: Ekstra validering/tilretning på nødvendige felter

WR-1464: Ved **Reiterering** flyttes cursoren automatisk til næste felt.

WR-1467: Forbedring af søgning af analyser til en indlæst **Gemt** rekvisition


WR-1451,1452, 1453,1460,1483, Tilrettelser på **Egne analyser** ifm. skift fra gammel til ny Webreq

WR-1488: Cpr-opslag forbedres

2 WebReq Admin.

2.1 Tilretning i forbindelse med analyse placering (WR-1475, WRA-765)

Teksterne under **Analyser** → **Placering** er nu rettet til, så de passer til seneste WebReq version. Placeringskodningen bagom var ikke helt identiske med visning, så det er nu ensrettet.

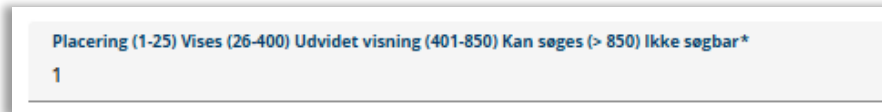

Forklaring til placering:

1-25: Synlig i WebReq


26-400: Ses med udvidet søgning: Pil (↓) på oversigten eller med **Søg**

401-850: Kan fremsøges i søgefelt

> 850: Ikke synlig, ikke søgbar

2.2 Forbedring af beskedfunktion i Admin (WRA-652,687)

Åben besked ved at klikke på den. Udløbne beskeder kan ses ved at sætte ☒ i **Vis gamle beskeder**, hvor de vil være synlig indtil 3 måneder efter udløbsdato. Udløbne beskeder vil være gråtonet.

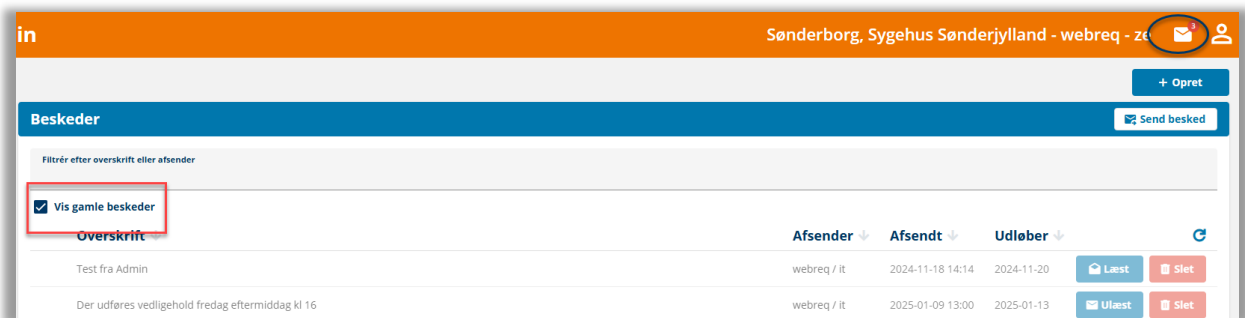


2.3 Felt til patientvejledninger på analyser (ID 6, WRA-743)

På **Analyser** → **Analyse data** er der sat et nyt felt ind, hvor man kan angive link til Patientvejledning.


URL til patientvejledning

Patientvejledning vises i WebReq med ikon og mouseover.

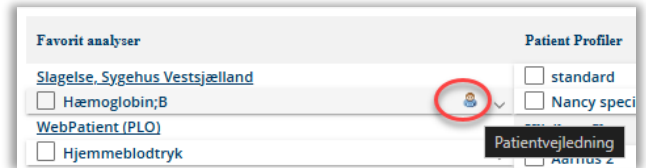

2.4 Søg Rekurrent på CVR-nr. (WRA-748)

Rekurrent kan nu fremsøges på CVR-nr.

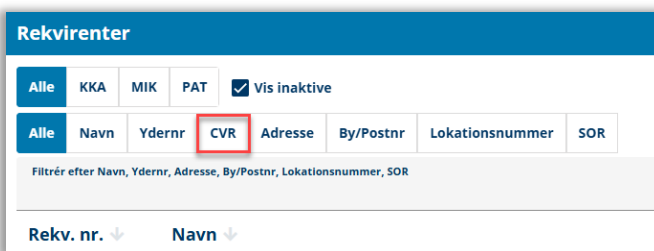

2.5 Visning af rekvisitionstype ved Søg Rekvisitioner (WRA-749)

I **Søg Rekvisitioner** findes nu også Rekvisitionstypen (**Rekvisition.FRekvisitionsType**)

Kun forkortelsen ses pga. pladsen, men mouseover viser hele teksten.


Rekvisitioner									
# Hotel (24 stk.) # Gemte (16 stk.) # 1 dag (2 stk.) # Sidste uge (22 stk.) # 2 uger tilbage (12 stk.) # 3 uger tilbage (49 stk.) # mere end 4 uger tilbage (22 stk.)									
Rekv. nr.	Orig. rekv.	Ønsket prøvetid	CPR nr.	Navn	Rekurrent	Init.	Speciale	Lab	Type Status
101370216831		20-05-2025 08:00:58	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Lægehuset WebReq	Region:	Klinisk Kemi	Køge Sygehus	Tages på lab hentet via WebService Nykøbing F. 10-04-2025 10:45
101370216785		22-04-2025 08:00:24	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Lægehuset WebReq	Region:	Klinisk Kemi	Køge Sygehus	Indsendes Afsendt 10-04-2025 09:00

OBS: Feltet vil dog stå tom for rekvisitioner der har en **Original rekurrent** på, men default er altid **Tages på lab** ved **Hotel rekvisitioner**.

2.6 Visning af status på Databehandlersaftale (WRA-750)

På **Rekvirent** → **Klinik opsætninger** → **Databehandlersaftale status** vises:

Godkendelsesdato, ydernr. (initialer) og CVR-nr. når man klikker på opdater-pilen. (data gemmes ikke)

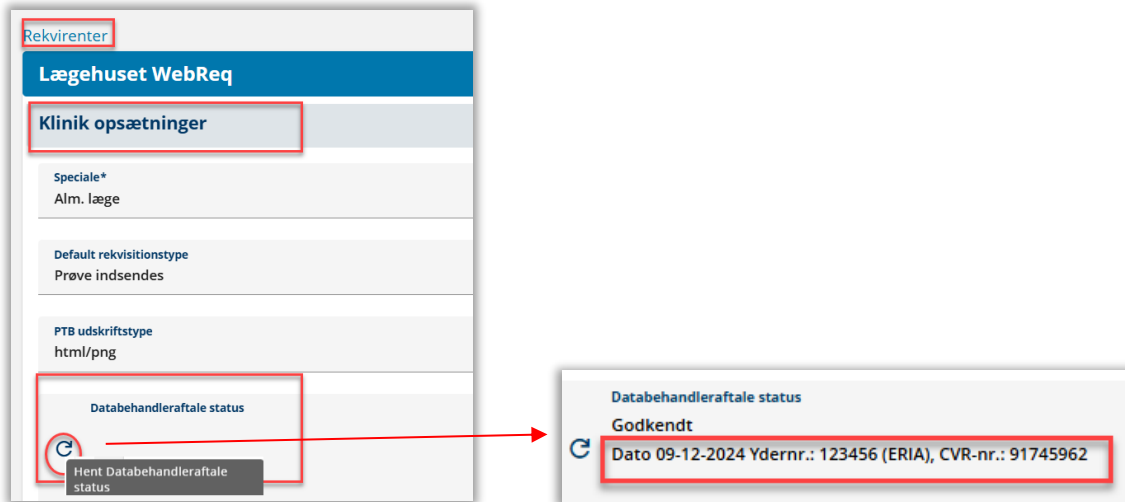

2.7 På Klinikprofiler ses hvilket lab. analyserne tilhører (WRA-755)

På **Rekvirent** → **Klinikprofiler** → **Ret** viser hvilket laboratorie analyserne tilhører.

Hvis analyser er blokeret for at måtte indgå i profiler, men som er tilføjet før blokering blev oprettet, vil det vises under **Valgte analyser**

Analyser		
Valgte analyser	Lab	
NPU03404 - Sedimentationsreaktion;B	990104	Slet
NPU01961 - Erytrocytter, vol.fr.;B	VE	Slet
Denne analyse er blokeret	VE	Slet

2.8 Systembeskeder viser beskedtype (WRA-761)

Under sendte **Systembeskeder** kan man nu se, hvis **Type** er **EDI**.

EDI anvendes ved udvidet Webquality og kan ikke overskrives.

Type	Overskrift	Besked	Oprettet	Udløber
EDI	Manglende udførelse af WebQuality	Til SynLab Doctor 1. Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallelanalyse med laboratoriet for analyserne: Hæmoglobin;B. Parallelanalyse er vigtigt af hensyn til analysekvaliteten i almen praksis og en forudsætning for at modtage	2025-01-23 09:16	2025-01-30


2.9 Feltet Default rekvisitionstype flyttes til Klinik opsætning (WRA-763)

Under **Rekvirent** er feltet **Default rekvisitionstype** flyttet ind under **Klinik Opsætninger**.



2.10 Ændringer i adgangskort til mobillab (WRA-752)

Der er ændret i adgangskort til mobillab, så der nu er disse tre forskellige rettigheder:

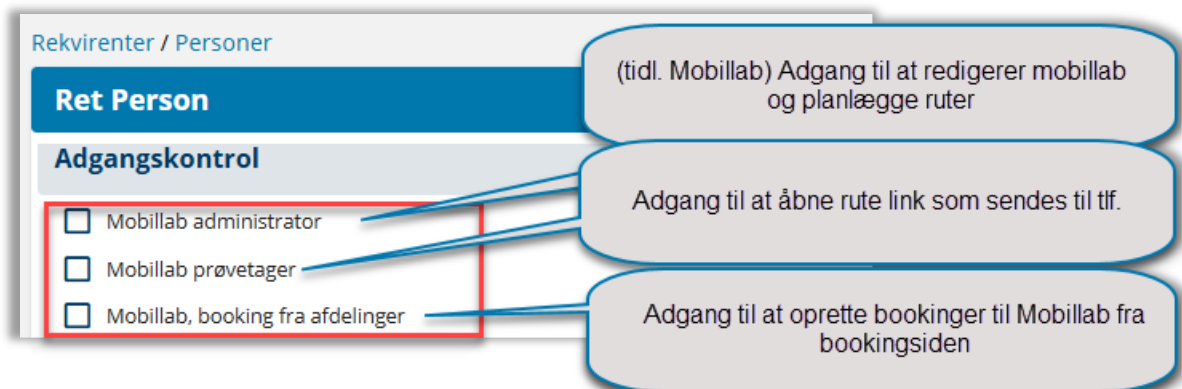

Dette er lavet ifm. at der skal kunne bestilles mobillab fra sygehusene.

2.11 Tekniske forbedringer

WRA-756: Feltet Analyser pr. glas er ikke længere obligatorisk på Egne analyse

WRA-759: Ensretning på laboratorie → Personer og Personale så navn kan rettet og CPR-nr. ikke kan rettes.